

## NOVEDAD Renfert Polish hybrid materials

### Pasta de pulido diamantada

Pasta de pulir diamantada, para uso específicamente extraoral, destinada al pulido de alto brillo de materiales híbridos.



#### Renfert Polish hybrid materials

Pasta de pulir diamantada, para uso específicamente extraoral, destinada al pulido de alto brillo de materiales híbridos. Mejor resultado de pulido posible por medio de partículas diamantadas en la pasta de pulir especialmente adaptadas a los materiales híbridos. Menores acumulaciones de placa dental y mayor vida útil de las restauraciones dentales mediante un tratamiento óptimo de las superficies.

#### Referencias

Renfert Polish hybrid materials, 13 g

No. 510 3000

#### Otros productos de la gama Renfert Polish

##### Renfert Polish all-in-one

Pasta de pulir universal de aplicación extraoral con una gama amplia en la granularidad del diamantado. Rápido resultado de alto brillo con diferentes materiales, tales como disilicato de litio, dióxido de circonio, cerámicas de revestimiento y polímeros de alto rendimiento.

##### Renfert Polish ZrO<sub>2</sub>

Pasta de pulir extraoral para dióxido de circonio con propiedades de abrasión específicamente adaptadas mediante una granularidad extra-grande del diamantado.

##### Renfert Polish LiSi<sub>2</sub>

Pasta de pulir extraoral especial para disilicato de litio con una granulometría de diamante gruesa y adaptada con precisión.

Renfert Polish all-in-one, 18 g



No. 5100100

Renfert Polish ZrO<sub>2</sub>, 18 g

No. 510 1100

Renfert Polish LiSi<sub>2</sub>, 18 g

No. 5102100

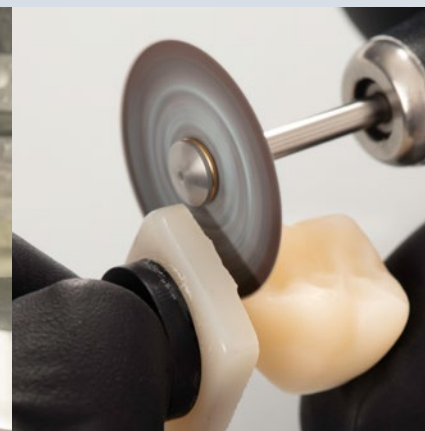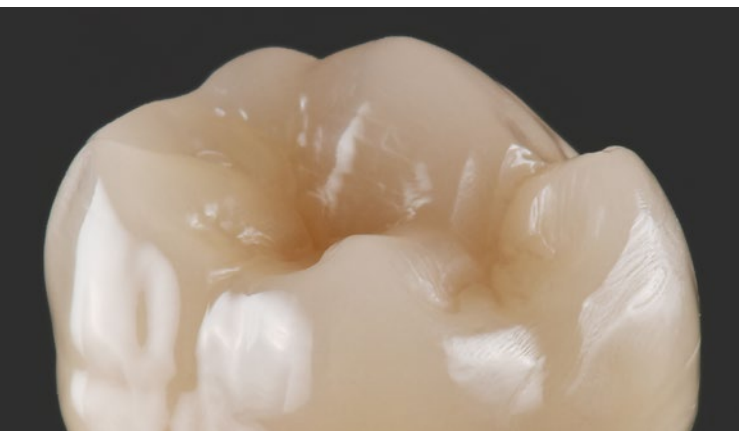






























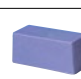

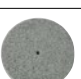













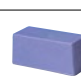




# Renfert

making work easy




## Pastas de pulido Renfert

Resumen de las pastas de pulido Renfert con los instrumentos de pulido recomendados

Producto			Instrumento de pulido recomendado		
Pasta de pulido	con partículas de diamante	Material / Campo de aplicación	Procesamiento / Prepulido	Pulido	Pulido de alto brillo
 Renfert Polish hybrid materials No. 5103000	✓	Material híbrido			
 Renfert Polish all-in-one No. 5100100	✓	Disilicato de litio, dióxido de circonio, cerámicas de recubrimiento, polímeros de alto rendimiento			
 Renfert Polish ZrO <sub>2</sub> No. 5101100	✓	Dióxido de circonio			
 Renfert Polish LiSi <sub>2</sub> No. 5102100	✓	Disilicato de litio			
 Kohinoor L No. 5160001	✓	Cerámica de recubrimiento			
 Brinell L No. 5190001	✓	Aleaciones nobles para metal-cerámica, cerámica			
 Opal L No. 5200001		Resinas de recubrimiento		 	
 Saphir No. 5150000		Aleaciones de metales nobles	 		
 Saphir No. 5150000		Aleaciones de cromo-cobalto	  	  	
 Pasta de pulido universal No. 5131000		PMMA, resinas	  	  	

\*Incluida en la entrega de Brinell L No. 5190001

### Pulidores para pieza de mano

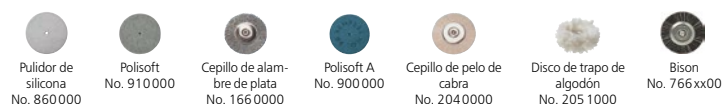

### Pulidores para motor de pulido

